


2) ファイルを開く (RAW データの場合)

① File → Import → Raw... →

~~サンプル画像 .dcm を選択~~

サンプル画像 dcm.raw を選択


RAW データのファイル形式は
様々です。
データの提供元に確認しましょう

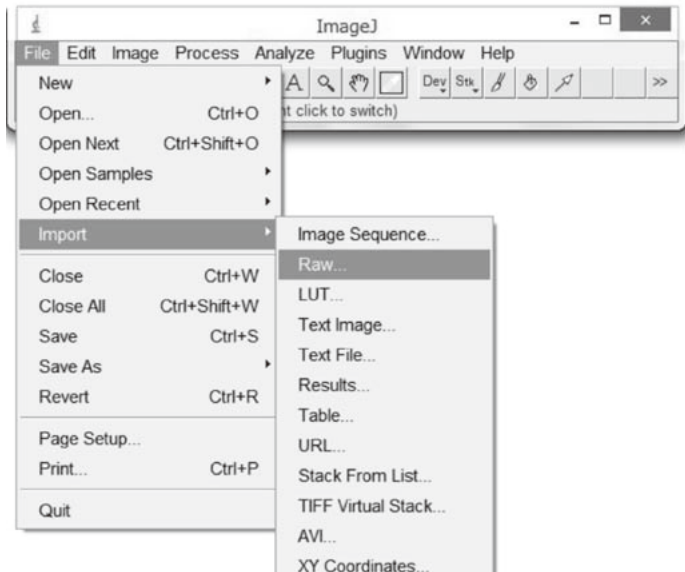

② 画像情報を入力する


右ダイアログボックスが出たら、
以下の項目を確認してください

Image type: は 16-bit Unsigned を選択
Width: は 1760 を入力
Height: は 1760 を入力
White is zero に✓を入れる
Little-endian byte order に✓を入れる

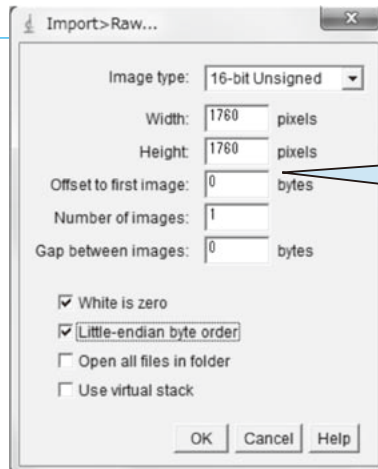

画像情報の各値は使用機器や読取条件によって異なります。装置メーカーに確認しましょう

③ 画像が開く

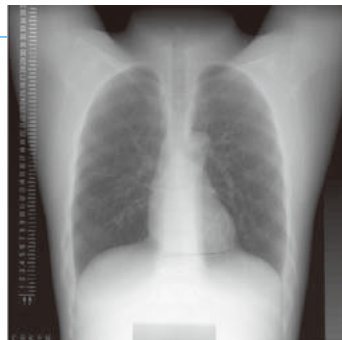

~~サンプル画像 .dcm~~

サンプル画像 dcm.raw